

安卓手機 Lifevisa BluePulse 心率應用程式下載流程


Download process for the Lifevisa BluePulse heart rate app on Android phones

以下應用程式下載流程範例使用 Pixel 8a，安卓版本 16，請自行對照您所使用的安卓手機。

The following application download example uses Pixel 8a, Android version 16. Please check the version for your own Android phone.


1.以手機描 QR code，點選 QR code 網址下載應用程式

1. Scan the QR code with your mobile phone and click on the QR code URL to download the application.

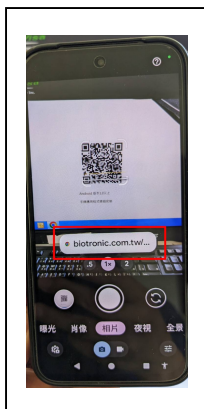

2.下載：

2.Download:

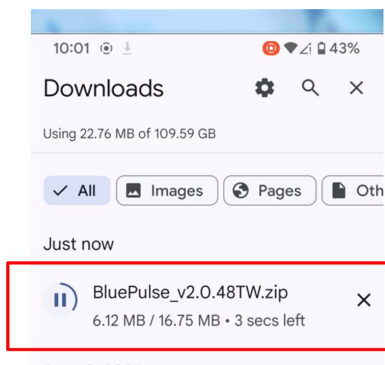


下載並點選進行解壓縮的檔案


Download and select the archive to extract.

3.解壓縮


3.Unzip

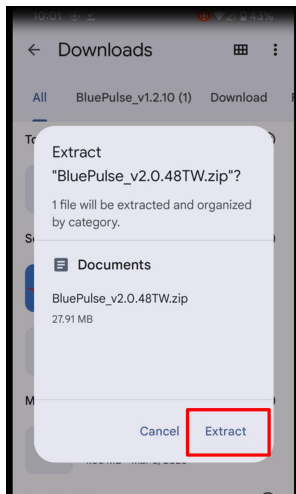


確認執行解壓縮 Confirm and execution of unzip

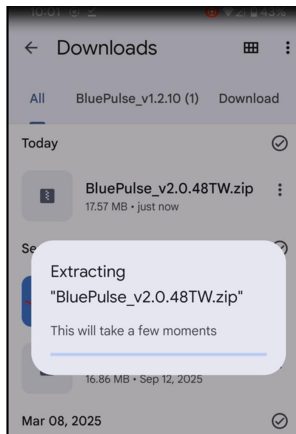

解壓縮進行中...Unzip in progress...

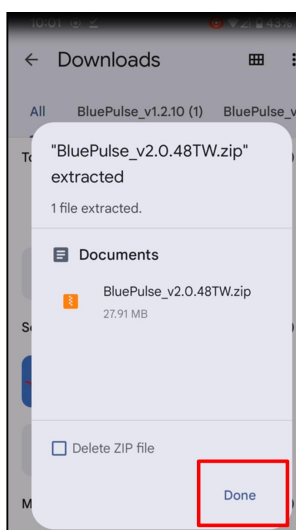


確認解壓縮完成 Confirm unzip complete

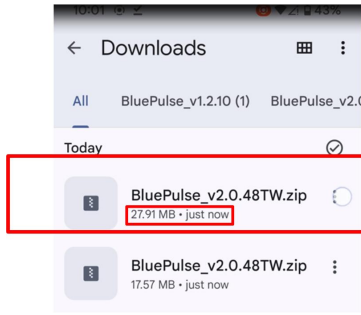


解壓縮完成後的檔案容量會增大。

The file size will increase after unzipping.

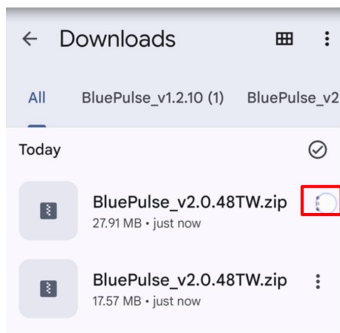


點選右上三功能點。

Select the three function dots in the upper right corner.

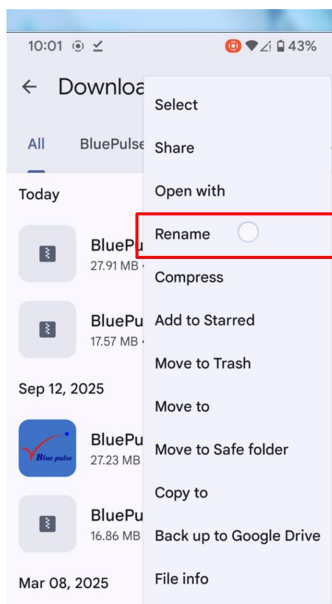

選擇“重新命名”

Select "Rename"

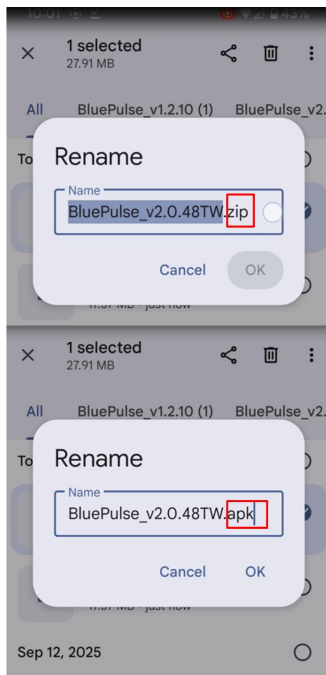


將 ZIP 副檔名改為 APK 並按下“確定”按鈕

Rename the extensions file name ZIP to APK and press the "OK" button..

4.允許重新修改副檔名

4.Allow renaming of file extensions

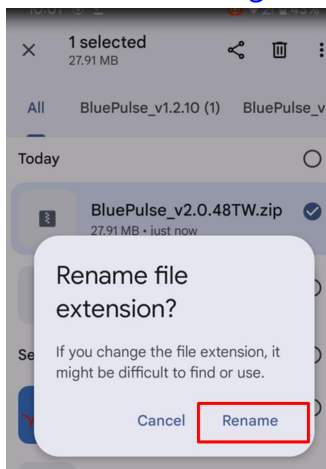


回應手機詢問並確定“重新命名”。

Respond to the phone inquiry and confirm "rename".


5. 準備安裝應用程式

5. Prepare to install the application.

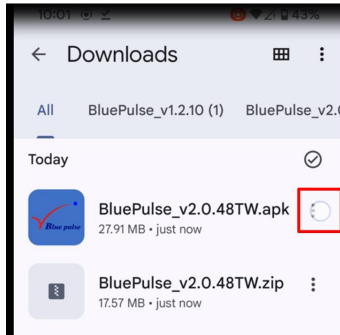


程式已經被解壓縮且修改副檔名完成，
按右角三功能點，準備進程式安裝。

The program has been unzipped and its file extension has been changed.
Click the three function dots in the right corner to prepare for program installation.

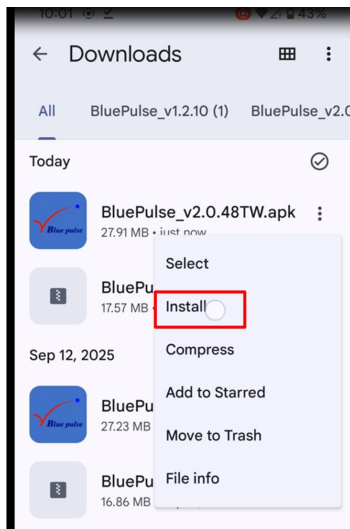



選擇“安裝”功能進程式安裝。

Select the "Install" option to install the program.

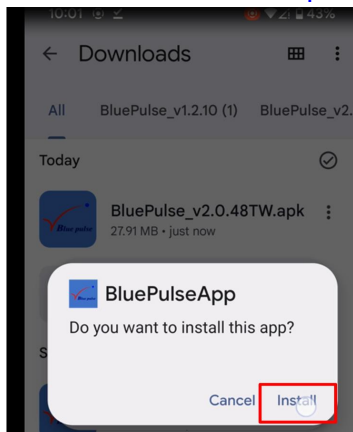


回覆手機詢問確認“安裝”。

Reply to the phone and confirm "Install".

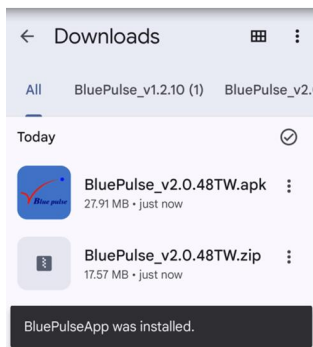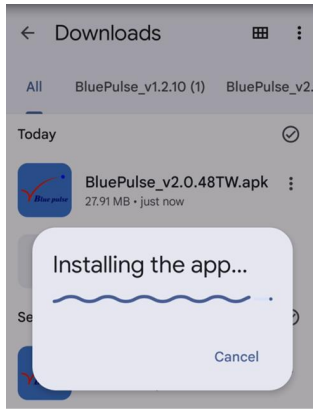

安裝進行中及完成，勾選“開啟”。

Installation in progress then complete; check "Start".

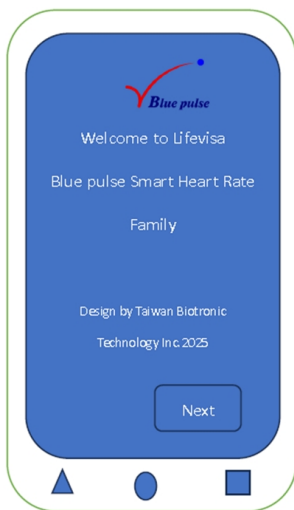

恭喜！安卓手機已安裝完成 Lifevisa BluePulse 安卓心率

APK，現在開始享受健康運動並且使用這個應用程式分享你的歡樂給朋友。

Congratulations! The Lifevisa BluePulse Android Heart Rate APK has been successfully installed on your Android phone. Now start enjoying healthy exercise and share your joy with your friends using this app.

對安裝過程有任何問題，歡迎 e-mail 詢問。

e-mail : Lifevisa@biotronic.com.tw

For any questions regarding the installation process, please feel free to contact us via email.

email: Lifevisa@biotronic.com.tw

★ 您 download 的版可能高於上述的版本號碼。請不用擔心下載的流程是相同地

★The version you downloaded may be higher than the version number listed above. Please don't worry, the download process is the same.